



Nouvelle machine d'anesthésie WATO EX-35
Meilleures performances que performance

mindray

Depuis 2006, Mindray a installé avec succès plus de 20 000 machines anesthésiques pour satisfaire les clients partout dans le monde. Mindray prend énormément d'orgueil en sachant que toutes les quelques secondes, un clinicien, quelque part dans le monde, allumera une machine d'anesthésie Mindray et l'utilisera avec une totale confiance et satisfaction. Au cours de la dernière décennie, Mindray a continué à travailler en étroite collaboration avec les cliniciens, à travers le monde, pour reconnaître et comprendre les défis cliniques rencontrés tous les jours et les surmonter avec de nouvelles solutions innovantes et intuitives. Dans cet esprit, Mindray est maintenant heureux de pouvoir utiliser la nouvelle WATO EX-35 améliorée avec des fonctionnalités avancées, une fonctionnalité et un nouveau look neuf pour 2106.



Meilleure Technologie...

Doté d'un nouvel écran tactile de 10,4 pouces, avec des contrôles de paramètres d'accès rapide et de la conception du menu, la nouvelle interface utilisateur WATO EX-35 permet à l'utilisateur de faire des ajustements au mode et au moniteur plus facilement que jamais au niveau du produit.

Le système tactile d'alarme intelligente fournit des informations détaillées en temps réel qui alertent rapidement et clairement le clinicien sur des situations défavorables prenant en charge la résolution anticipée.

Meilleure performance...

En utilisant les dernières technologies, le nouveau WATO EX-35 prend en charge une large gamme de fonctionnalités assurant que toutes les procédures anesthésiques sont livrées efficacement en toute sécurité. Le module AG intégré Plug-and-play (auto ID of 5 agent et N2O), ventilateur multi-mode intégré supporte les modes de ventilation contrôlés et de support. La fonction unique de détecteur de gaz entraîné par le ventilateur Mindray garantit que le patient soit ventilé sans interruption en tout temps ...

Meilleure utilisabilité ...

Conçu avec une utilité essentielle à l'esprit, le WATO EX-35 vous aide à réduire votre charge de travail quotidienne complexe, et vous donne une nouvelle expérience utilisateur. Les poignées ergonomiques, la pédale, vous permettent de déplacer la machine facilement et de l'utiliser pendant une longue période sans fatigue physique supplémentaire. Et cela permet au patient d'être ventilé sans interruption en tout temps ...



Le nouveau WATO EX-35 prend en charge un écran tactile haute résolution de 10,4 "qui supporte un maximum de 3 formes d'onde de ventilation (EtCO₂, pression, flux et volume), boucle de spirométrie et surveillance complète du gaz sur un seul écran tout en permettant un accès direct à tous les paramètres et paramètres.

Le nouveau tableau, au niveau, la structure du menu avec un contrôle tactile rapide est une première mondiale pour les appareils au niveau du marché.

Gestion de l'alarme intelligente tactile

Le système d'alarme intelligent fournit des informations détaillées en temps réel qui alertent rapidement et clairement le clinicien sur des situations défavorables prenant en charge la résolution anticipée.

Le journal complet des alarmes comprend des listes d'alarmes physiques avec un instantané de paramètres affichés et un logiciel de diagnostic d'alarme technique qui permet de causer des alarmes qui assurent un dépannage immédiat dans la situation immédiate.



Meilleure utilisabilité ...

Avec des poignées facilement équipées et des roulettes à roulement lisse, la nouvelle WATO EX-35 peut facilement être positionnée facilement dans le lieu de travail.

La grande surface de travail facile à nettoyer offre beaucoup d'espace pour l'écriture de notes, le placement de médicaments et l'équipement d'intubation et un repose-pieds ergonomique pour le confort total de l'utilisateur tout au long des cas les plus longs.





Surveillance innovante du gaz P-n-P

Notre module d'anesthésie à double fente Plug-and-Plug amélioré ou module d'anesthésique à double fente fournit une analyse complète, visuelle, respiratoire par inhalation pour FiO₂, EtO₂, CO₂, N₂O et détection automatique de 5 agents anesthésiques. De plus, les modules peuvent être déplacés entre des moniteurs Mindray fonctionnellement similaires et des dispositifs anesthésiques améliorant encore la configuration et la flexibilité de l'appareil selon vos besoins.


Interrupteur auto-piloté

La sécurité est au cœur de tous les appareils de Mindray et le nouveau WATO EX-35 ne fait pas exception. La toute nouvelle fonction d'auto-interruption du ventilateur gaz assure que le patient est ventilé mécaniquement en tout temps, même si l'alimentation primaire du distributeur du ventilateur échoue.



Ventilateur haute performance

Le nouveau WATO EX-35 prend en charge une gamme complète de modes de ventilation contrôlés et de soutien et avec une compensation dynamique du volume des têtes, aussi vite que Tve 20ml, la nouvelle WATO EX-35 convient à toutes les catégories de patients de nouveau-nés à adultes.

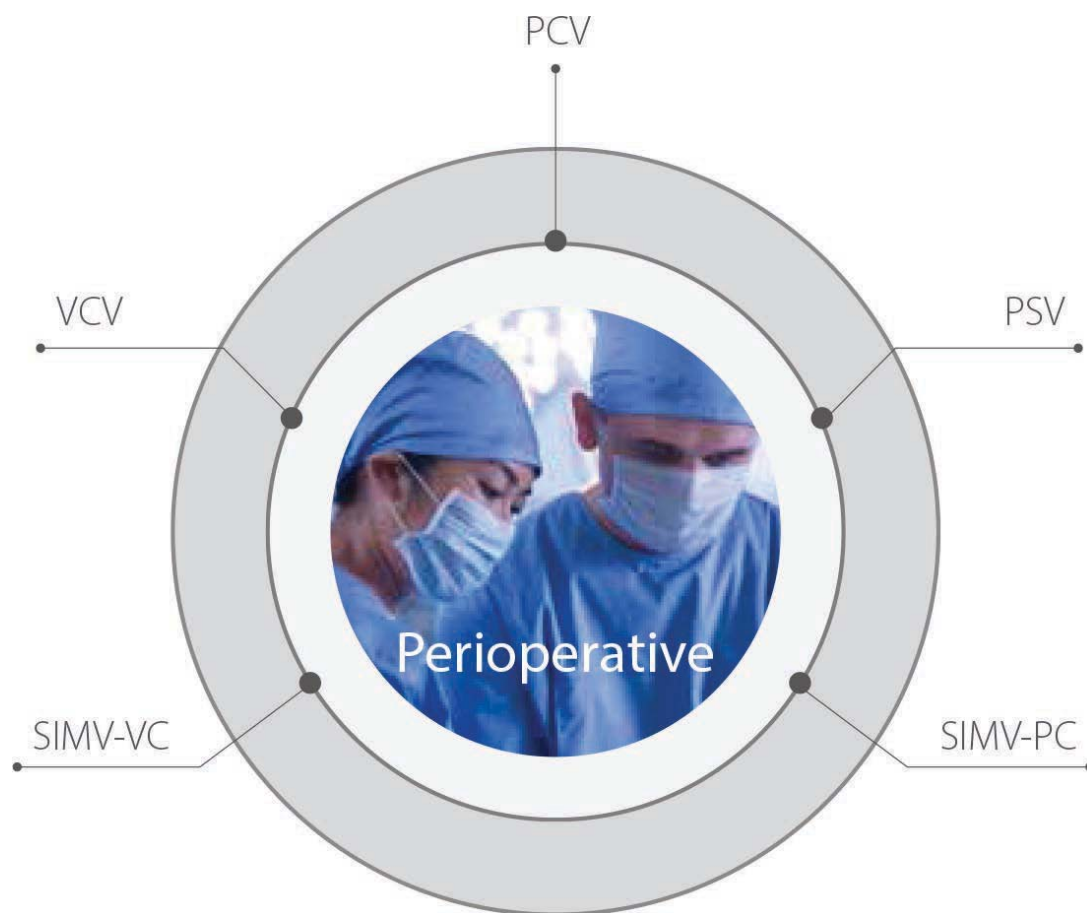

Modes de ventilation disponibles:

- * Ventilation contrôlée par volume (VCV)
- * Ventilation sous pression contrôlée (PCV)
- * Soutien à la pression Ventilation + ventilation de l'apnée (ventilation PSV + apnée) Ventilation obligatoire
- * Intermittente synchronisée - VC (SIMV -VC) Ventilation obligatoire
- * Intermittente synchronisée - PC (SIMV-PC).